



Мешок для оксигенации – дыхательный мешок для оксигенации с клапаном / с кислородной трубкой / с маской EcoLite для периода пробуждения



Кислородная и аэрозольная терапия • Кислородная терапия



Качество, инновации и выбор

Присоединяйтесь к нам




www.intersurgical.com

Мешок для оксигенации для периода пробуждения.

Мешок для оксигенации для периода пробуждения от Intersurgical разработан для доставки дополнительного кислорода в послеоперационный период пациентам на спонтанном дыхании через устройство для поддержания проходимости дыхательных путей при транспортировке и пробуждении. Малый вес устройства создает минимальное давление на надгортанный воздуховод или эндотрахеальную трубку. Резервный мешок обеспечивает визуальный и аудио-контроль дыхания.



Концентрация кислорода (%) при различной скорости потока *

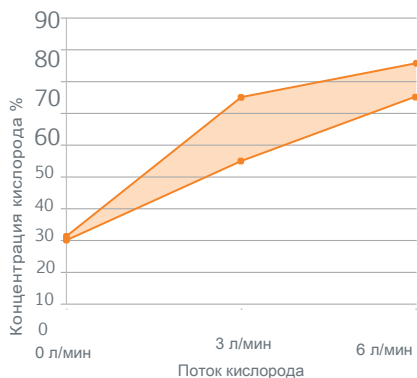

Одноразовый, не содержит латекс и фталаты

*Концентрация кислорода зависит от потока кислорода и дыхательного объема пациента. Ссылки: Внутренние отчеты о тестах мешка для оксигенации для периода пробуждения.

Малый вес

Минимальное давление на устройство в дыхательных путях

Мешок раздувается и сдувается
визуальный контроль дыхания

Материал мешка "шуршащий"

Обеспечивает аудио-контроль дыхания

Резервный мешок наполняется кислородом во время выдоха для повышения концентрации поставляемого кислорода

Низкий уровень повторно вдыхаемого CO₂

6 мм порт в соответствии с BS EN 13544-2, Надежное крепление кислородного шланга

Стандартный коннектор 15мм позволяет присоединять его к надгортанному воздуховоду или ЭТТ

Сделать запрос

www.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/oxygen-recovery-t-piece-with-reservoir-bag

| Код | Описание | Кол-во в коробке |
|---------|--|------------------|
| 1041000 | Дыхательный мешок для оксигенации с дыхательным клапаном | 100 |
| 1041001 | Дыхательный мешок для оксигенации с дыхательным клапаном, с кислородной трубкой | 40 |
| 1041002 | Дыхательный мешок для оксигенации с дыхательным клапаном, с маской EcoLite средней концентрации кислорода для взрослых, с кислородной трубкой 2.1м | 55 |

IS10.32 • Выпуск 1 04s.17



ЗАО «Интерседжикал», 117105, Варшавское шоссе, д.26, стр.11 Тел./факс (495) 7716809

info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia Czech Republic • Turkey • South Africa • China • Japan Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia



Intersurgical Ltd сертифицирован по ISO 14001, ISO 9001 и ISO 13485

Пожалуйста, подумайте прежде чем печатать. Сохраните энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот документ, пожалуйста, используйте двустороннюю печать.