




## Cirrus™ 2

Ассортимент небулайзеров и наборов

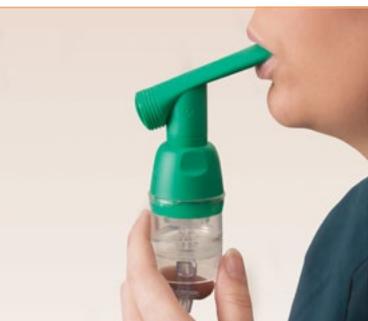

Кислородная и аэрозольная терапия ▪ Небулайзерная терапия

## Cirrus™2 небулайзеры и наборы с маской

Cirrus2 оснащен градуированной чашей небулайзера, которая позволяет видеть, сколько лекарства осталось в небулайзере. Чаша небулайзера оснащена быстросъемным фитингом, позволяющим присоединять и отсоединять небулайзер за четверть оборота. Это ускоряет процесс заправки и обеспечивает надежную герметичность между чашей и корпусом небулайзера.

Небулайзер Cirrus2 предназначен для доставки лекарств при трахеобронхиальном осаждении. Технические характеристики небулайзера подробно изложены в документации, прилагаемой к продукции.

В комплекты масок Cirrus2 входит аэрозольная маска Intersurgical EcoLite™, эта маска не из ПВХ снижает воздействие этого продукта на окружающую среду.


[▶ Смотрите видео](#)

**Стандартный конус 22F**  
Совместим с масками, Т-образными соединителями и мундштуками

**Быстросъемный фитинг**  
Легко подсоединяется и отсоединяется

**Градуированная направляющая для небулайзерной чаши**  
Более быстрая подготовка

**Cirrus2 будет работать в ориентациях от горизонтального до вертикального положения**

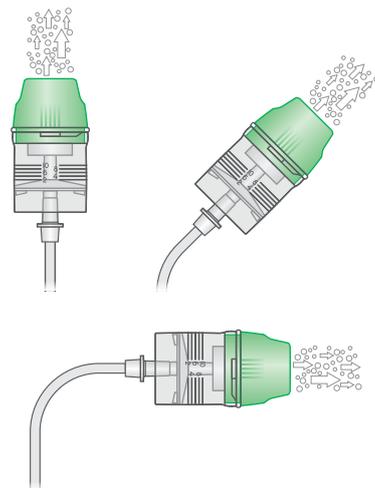

### Самогерметизирующийся тройник

Cirrus2 доступен с самогерметизирующимся тройником, который позволяет присоединять (или отсоединять) небулайзер от аппарата ИВЛ, не прерывая вентиляции легких пациента и предупреждая непреднамеренное активирование каких-либо сигналов тревоги.

[▶ Смотрите видео](#)





## Небулайзер Cirrus™2 в комплекте с маской Intersurgical EcoLite™

### Добро пожаловать в Зону Комфорта

Уникальная конструкция и материалы, используемые для изготовления маски Intersurgical EcoLite, обеспечивают повышенный комфорт для пациента и снижают воздействие на окружающую среду.

### Комфорт для пациента

Улучшение комфорта пациента стало ключевым фактором при разработке маски Intersurgical EcoLite. Новейшие производственные технологии позволили нам объединить два материала, не содержащих ПВХ, в одном изделии. Полипропиленовый материал, из которого состоит корпус маски Intersurgical EcoLite, прозрачный, легкий и достаточно жесткий, чтобы сохранять форму маски, в то время как второй, более мягкий материал ТРЕ, используется в манжете, которая контактирует с лицом пациента.

### Комфортно для окружающей среды

Маска Intersurgical EcoLite является важной частью нашей линейки Eco, разработанной в рамках нашего внимания к устойчивому развитию. Различные группы ставили под сомнение использование ПВХ в медицинских изделиях и его воздействие на окружающую среду. Использование альтернативных материалов привело к исключению ПВХ из маски Intersurgical EcoLite, что снизило воздействие на окружающую среду.

### Изогнутая манжета

Подходит для различных форм носа, разработана для снижения риска попадания аэрозоля в глаза пациента

### Нет металлического зажима для носа

Совместима с МРТ

### Мягкая лицевая манжета

Повышенный комфорт пациента

### Резинка может быть расположена под ушами или над ними\*

Положение резинки под ушами исключает травму верхней части ушей

**Выбор положения манжеты «под подбородком» или «на подбородке»**  
Идеально подходит для разной анатомии лица




### Intersurgical EcoLite

Узнать больше

### Eco ассортимент

Узнать больше

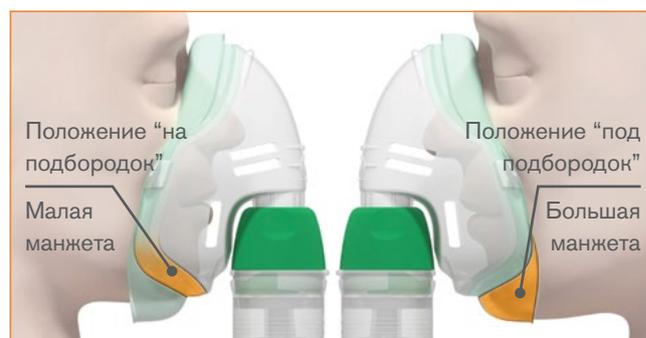

\*Только для взрослых



### Cirrus™2 небулайзеры и наборы с маской

Код	Описание	Длина трубки	Кол-во/уп.
1402000	Небулайзер Cirrus2		75
1453015	 Комплект для взрослых: небулайзер Cirrus™2 с маской Intersurgical EcoLite и трубкой	2,1 м	30 
1453017	Комплект для взрослых: небулайзер Cirrus™2 с маской Intersurgical EcoLite и трубкой без ПВХ	2,1 м	30 
1453014	Комплект для взрослых: небулайзер Cirrus2 с маской Intersurgical EcoLite, с трубкой с универсальным коннектором	2,1 м	30 
1454015	Комплект для детей: небулайзер Cirrus2 с маской Intersurgical EcoLite с трубкой	2,1 м	36 
1454017	Комплект для детей: небулайзер Cirrus2 с маской Intersurgical EcoLite, с трубкой и универсальным коннектором	2,1 м	40 
1455000	Комплект: небулайзер Cirrus2 с цельнолитым мундштуком и трубкой	2,1 м	35
1455002	Комплект: небулайзер Cirrus2 с цельнолитым мундштуком, с трубкой и универсальным коннектором	2,1 м	35
1464000	Комплект: небулайзер Cirrus™2 с универсальным мундштуком, с Т-образным коннектором и трубкой	1,8 м	40
1464004	Комплект: небулайзер Cirrus™2 с универсальным мундштуком, с Т-образным коннектором и фильтром, с трубкой Sure Loc	1,8 м	20
1464021	Комплект: небулайзер Cirrus™2 с мундштуком, фильтром и трубкой	2,1 м	20
2605000	Комплект: небулайзер Cirrus™2 с Т-образным коннектором, с трубкой (к дыхательному контуру 22мм.)	1,8 м	40
2606000	Комплект: небулайзер Cirrus™2 с Т-образным коннектором, с трубкой (к дыхательному контуру 15мм.)	1,8 м	35
2608000	Комплект: небулайзер Cirrus™2 с Т-образным коннектором, с трубкой (к дыхательному контуру 10мм.)	1,8 м	45

### Самогерметизирующийся Т-образный коннектор

Код	Описание	Кол-во/уп.
2609000	Комплект: небулайзер Cirrus2 с самогерметизирующимся Т-образным коннектором 22М-22F, с трубкой	35
1814000	Самогерметизирующийся Т-образный коннектор 22М-22F	40

Сделать запрос

 Показано на рис.  Продукт с меньшим воздействием на окружающую среду

IS10.23 RU • Issue 18 09.25



ЗАО «Интерседжилал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904  
Т: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и MDSAP

**Пожалуйста, подумайте перед тем, как печатать**  
Берегите энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот информационный листок, используйте двустороннюю печать, пожалуйста.