



## HOT Top™2

Ассортимент высокопроизводительных небулайзеров для сокращения времени лечения



Кислородная и аэрозольная терапия ▪ Небулайзерная терапия



## НОТ Top™2 небулайзер

Небулайзер НОТ Top2 представляет новый дизайн “открытого” небулайзера, включающий двойной порт выхода, это приводит к высокой скорости исходящего потока, что снижает время лечения и увеличивает удовлетворенность пациентов.

Кроме того, небулайзер НОТ Top2 оснащен градуированной чашей для небулайзера, которая позволяет видеть, сколько лекарства осталось в небулайзере, и быстросъемным фитингом, позволяющим присоединять и отсоединять небулайзер за четверть оборота. Это ускоряет процесс заправки и обеспечивает надежную герметичность между чашей и корпусом небулайзера.

Небулайзер НОТ Top2 предназначен для доставки лекарств при трахеобронхиальном осаждении. Технические характеристики небулайзера подробно изложены в документации, прилагаемой к продукции, и доступны по запросу.

При более низком расходе газа 6 л/мин производительность аналогична обычному закрытому небулайзеру, что делает его пригодным для использования с устройствами, имеющими более низкий расход.

В комплекты масок НОТ Top2 входит аэрозольная маска Intersurgical EcoLite™, эта маска не содержит ПВХ, тем самым снижает воздействие этого продукта на окружающую среду.

[▶ Посмотрите видео](#)

### Стандартный конус 22F

Совместимо с масками, Т-образными соединителями и мундштуками

### Быстросъемный фитинг

Быстрое заполнение

### Градуированная направляющая для небулайзерной чаши


Более быстрое приготовление

### Сокращает время лечения

Может улучшить комплаенс пациента



Небулайзер НОТ Top2 будет работать в ориентациях от вертикальной до горизонтальной

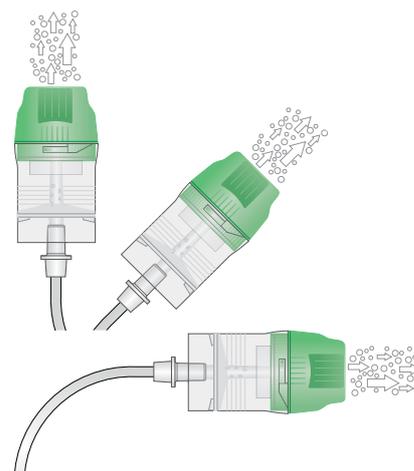

## Надежное соединение трубок

### База Sure-Loc™

Небулайзеры НОТ Top2 также доступны с основанием Sure-Loc, при использовании с трубной и адаптером Intersurgical Sure-Loc эта система обеспечивает надежные соединения, снижая риск случайного отсоединения трубки от небулайзера и расходомера.

Кислородная трубка навинчивается на основание небулайзера, а другой конец подключается к расходомеру с помощью адаптера.

Трубку Sure-Loc можно также использовать со стандартным конусом небулайзера, а небулайзеры Sure-Loc также совместимы со стандартными трубками.



Нажмите и поверните, чтобы закрыть



## Небулайзер HOT Top™2, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite™

### Добро пожаловать в Зону Комфорта

Уникальная конструкция и материалы, используемые для изготовления маски Intersurgical EcoLite, обеспечивают повышенный комфорт для пациента и снижают воздействие на окружающую среду.

### Комфорт для пациента

Улучшение комфорта пациента стало ключевым фактором при разработке маски Intersurgical EcoLite. Новейшие производственные технологии позволили нам объединить два материала, не содержащих ПВХ, в одном изделии. Полипропиленовый материал, из которого состоит корпус маски Intersurgical EcoLite, прозрачный, легкий и достаточно жесткий, чтобы сохранять форму маски, в то время как второй, более мягкий материал ТРЕ, используется в манжете, которая контактирует с лицом пациента.

### Комфортно для окружающей среды

Маска Intersurgical EcoLite является важной частью нашей линейки Eco, разработанной в рамках нашего внимания к устойчивому развитию. Различные группы ставили под сомнение использование ПВХ в медицинских изделиях и его воздействие на окружающую среду. Использование альтернативных материалов привело к исключению ПВХ из маски Intersurgical EcoLite, что снизило воздействие на окружающую среду.

### Изогнутая манжета

Подходит для различных форм носа, разработана для снижения риска попадания аэрозоля в глаза пациента

### Нет металлического зажима для носа

Совместима с МРТ

### Мягкая лицевая манжета

Повышенный комфорт пациента

### Резинка может быть расположена под ушами или над ними

Положение резинки под ушами исключает травму верхней части ушей

### Выбор положения манжеты «под подбородком» или «на подбородке»

Идеально подходит для разной анатомии лица





### Intersurgical EcoLite

Узнать больше

### Eco ассортимент

Узнать больше

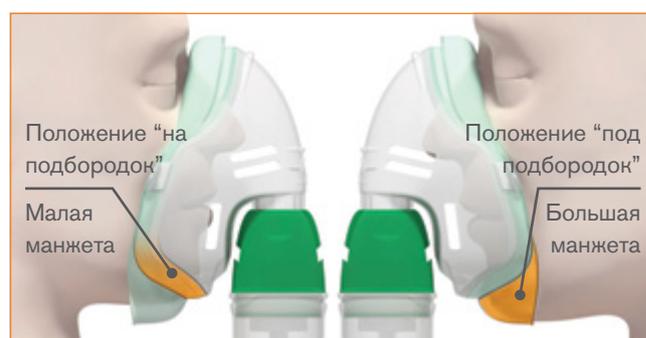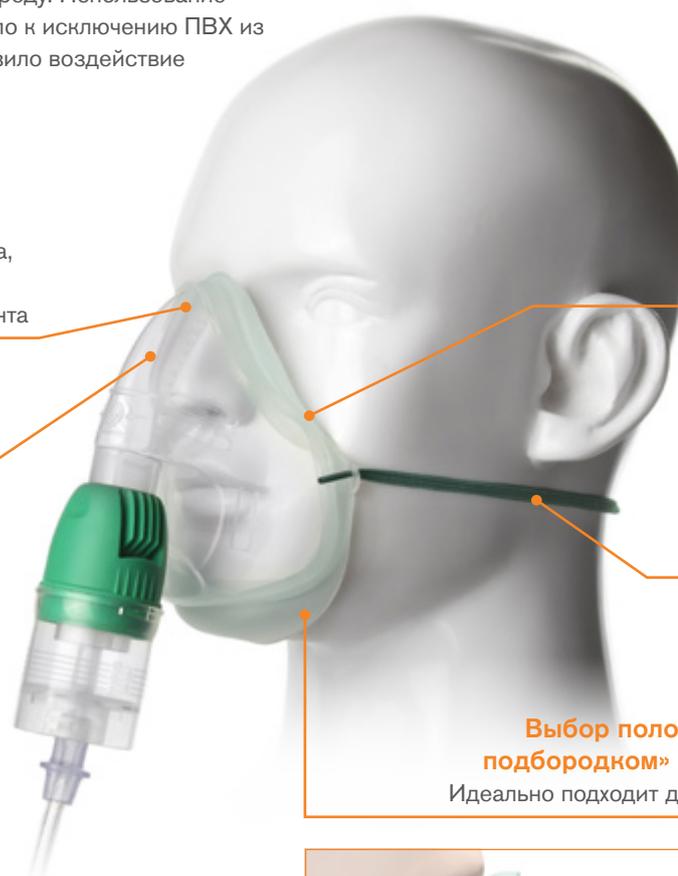



## Информация о продукте и аксессуары

### Небулайзеры HOT Top™2 – стандартное основание

Код	Описание	Длина трубки	Кол-во/уп.
1472015	Небулайзер HOT Top2		65
1463015	Небулайзер HOT Top2 для взрослых, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite™ с трубкой	1.8м	30 
1463016	Небулайзер HOT Top2 для взрослых, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite™, с трубкой с универсальным коннектором	1.8м	30 
1468015	Небулайзер HOT Top2 для детей, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite с трубкой	1.8м	36 
1468016	Небулайзер HOT Top2 для детей, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite с трубкой с универсальным коннектором	1.8м	36 
1478015	Комплект: небулайзер HOT Top2 с мундштуком и трубкой	1.8м	45

### Небулайзеры HOT Top2 nebulisers – с основанием Sure-Loc™

Код	Описание	Длина трубки	Кол-во/уп.
1471015	Небулайзер HOT Top2 с основанием Sure-Loc		75
1473015	Небулайзер HOT Top2 для взрослых, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite, с основанием Sure-Loc и трубкой	1.8м	30 
1474015	Небулайзер HOT Top2 для детей, в комплекте с маской Intersurgical EcoLite, с основанием Sure-Loc и трубкой	1.8м	36 
1475015	Небулайзер HOT Top2 в комплекте с мундштуком, с основанием Sure-Loc и трубкой	1.8м	45

Сделать запрос

 Продукт с меньшим воздействием на окружающую среду

IS10.28 RU ▪ Issue 14 01.25



ЗАО «Интерседжинал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904  
T: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и MDSAP

**Пожалуйста, подумайте перед тем, как печатать**  
Берегите энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот информационный листок, используйте двустороннюю печать, пожалуйста.