




InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок InterForm стилет для интубации

Основное назначение - проведение интубации и замены эндотрахеальной трубки

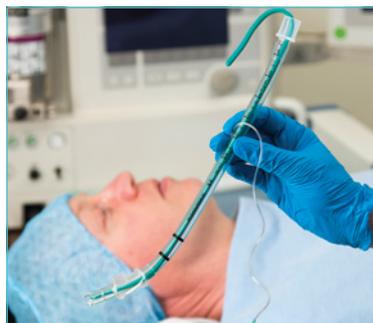


Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪ Airway Accessories

InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок

InterGuide - это гибкий проводник для эндотрахеальных трубок, известный также как буж. Он используется как проводник-направитель при интубации (особенно при трудной интубации) и как трубнообменник при замене эндотрахеальной трубки. На внешней поверхности проводника InterGuide нанесены метки глубины введения с шагом 100мм. Это одноразовое изделие, не содержит латекс, поставляется в стерильном виде в легко открывающейся индивидуальной упаковке.

Атравматичный дистальный наконечник типа coude

для снижения потенциальных травм пациента - небольшой изгиб, овальная форма

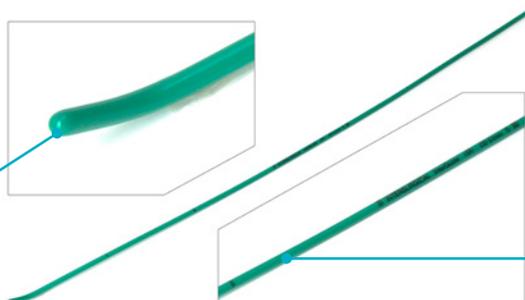

Поверхность с низким трением - низкофрикционный материал

Для легкого введения и проведения эндотрахеальной трубки

Код	Описание	Размер	Наружный диаметр (НД)	Длина	Кол-во/уп.
8070015	InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок	15FR	5.0mm	700mm	10
8070010	InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок	10FR	3.3mm	700mm	10
8070006	InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок	6FR	2.0mm	530mm	10


[Сделать запрос](#)

InterForm стилет для интубации

InterForm представляет собой гибкий тонкий конфигурируемый стилет, который перед применением вводится в эндотрахеальную трубку до совмещения кончиков. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму для облегчения введения. InterForm является одноразовым изделием, не содержит латекс, поставляется в стерильном виде в легко открывающейся индивидуальной упаковке.

Алюминиевый сердечник

Обеспечивает легкую конфигурацию ЭТ с введенным стилетом

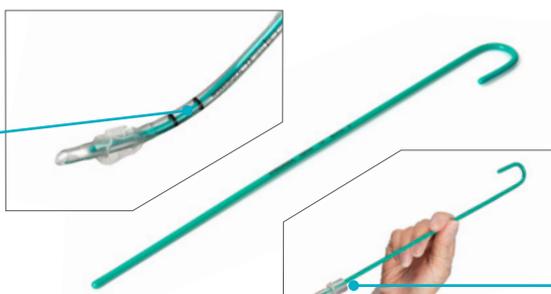

Поверхность с низким трением - низкофрикционный материал

Для легкого введения и проведения эндотрахеальной трубки

Код	Описание	Размер	Наружный диаметр (НД)	Длина	Кол-во/уп.
8080014	InterForm стилет для интубации	14FR	4.7mm	340mm	10
8080010	InterForm стилет для интубации	10FR	3.3mm	340mm	10
8080006	InterForm стилет для интубации	6FR	2.0mm	275mm	10

[Сделать запрос](#)

Имеется в наличии в стерильном виде

IS6.5 RU • Issue 6 06.24



ЗАО «Интерседжинал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904
T: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и MDSAP

Пожалуйста, подумайте перед тем, как печатать
Берегите энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот информационный листок, используйте двустороннюю печать, пожалуйста.