



nFlow™

nFlow Infant система назального CPAP для младенцев



Реанимация ▪ Реанимационные дыхательные контуры



nFlow™

С заботой о самых маленьких

Самые маленькие пациенты больше нуждаются в заботе. Младенцам жизненно необходимы безопасность и комфорт на самых ранних шагах жизни.

Выбор CPAP для младенцев

Дыхательный контур nFlow от Intersurgical обеспечивает комплексное решение для поддержания назальной вентиляции новорожденных младенцев с положительным постоянным давлением в дыхательных путях (CPAP). При этом реализуется технология "gas flip" – переменный поток, которая обеспечивается конструкцией генератора nFlow.

Контур nFlow совместим со всеми генераторами потока и увлажнителями, применяемыми в настоящее время.

Дыхательные контуры nFlow


Контур nFlow - однолинейная (одношланговая) схема с проводом обогрева. К дистальному концу шланга стыкуется трубка подачи свежего газа от nFlow генератора, обеспечивающего переменный поток при CPAP вентиляции. Генератор имеет, кроме трубок подачи свежего газа, трубку мониторинга давления и конфигурируемую трубку Superset для отвода отработанной газовой смеси. Материалы, используемые в генераторе, не содержат фталатов.



Сделать запрос

Find out more


▶ Посмотрите видео

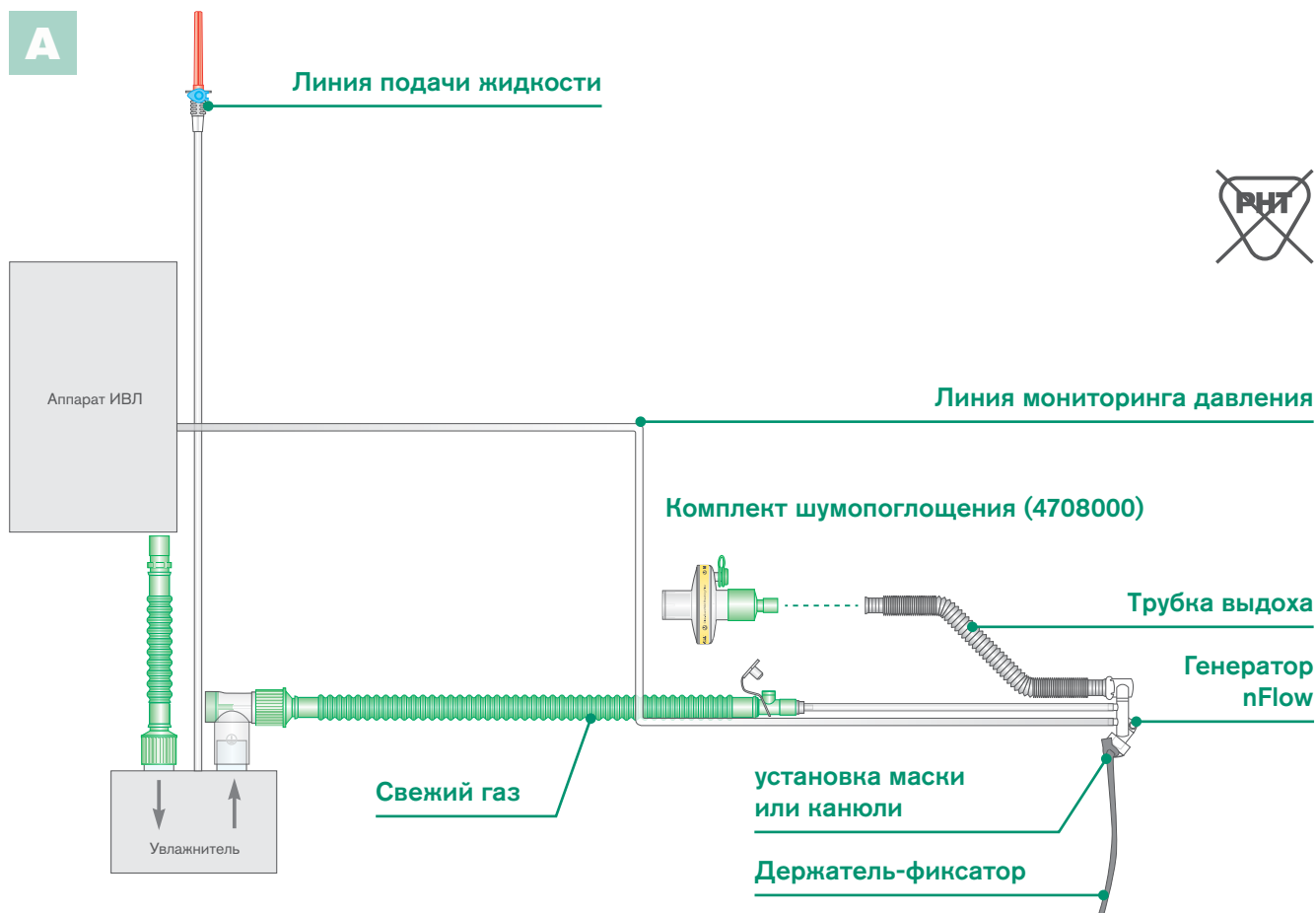



Простота выбора размера

Подобрать правильный размер можно двумя способами: с помощью прозрачного круглого «указателя» с нанесенными схемами канюль и масок с указанием соответствующих размеров; в виде метрической ленты с образцами размера держателей-фиксаторов.

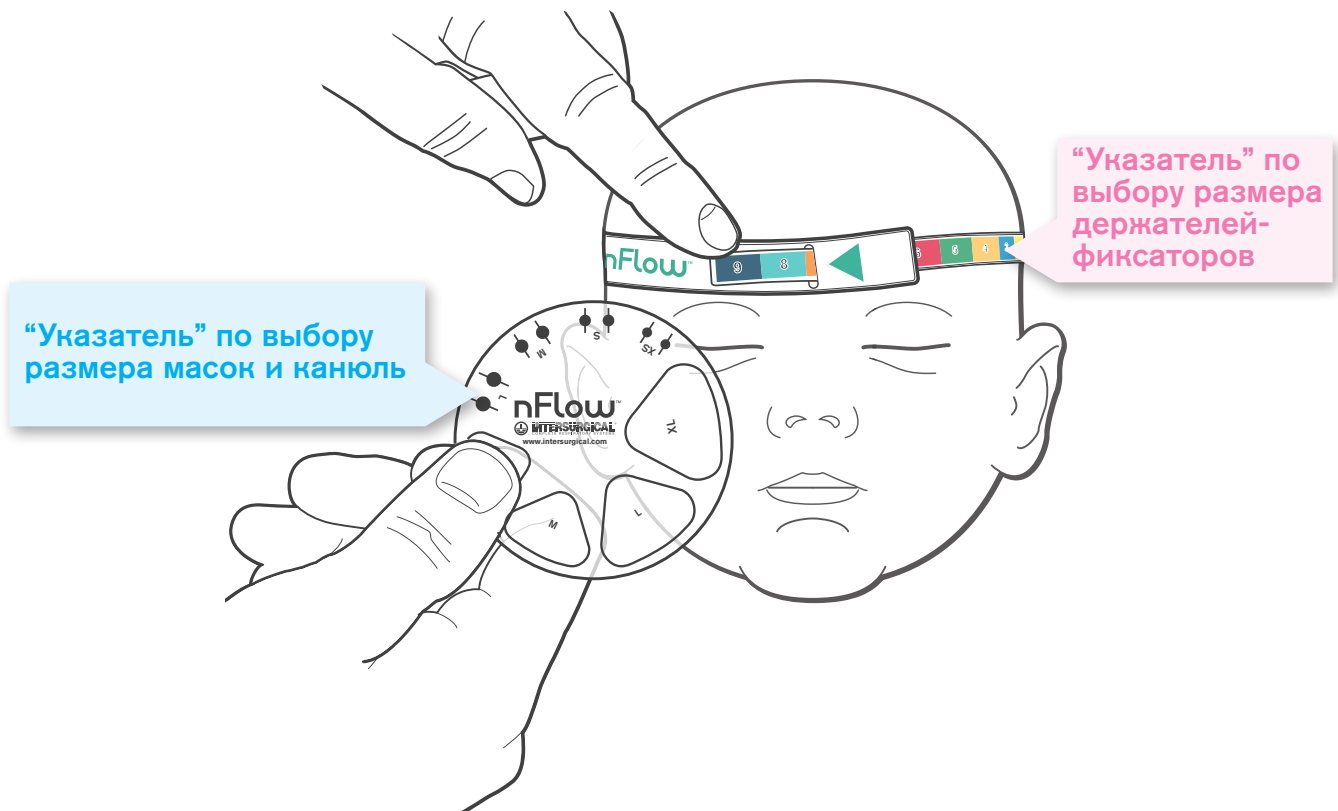

12 шапочек

Держатели-фиксаторы представлены в 12 размерах с цветоиндикацией размера. Держатели-фиксаторы имеют прорези для подвязок и застежки «липучки» для фиксации трубок.



Интерфейс пациента

Маски и канюли представлены в 4 размерах. Они выполнены из мягкого силикона, комфортны. Манжета маски обеспечивает требуемую герметичность прилегания.



В Держатели-фиксаторы



С Носовые маски



Д Носовые канюли





Простая система заказа. Чтобы получить полный комплект дыхательного контура, вы можете выбрать коды изделий из каждой группы от А до D. Однако вы можете и отдельно заказать необходимые вам изделия.



Код	Описание	Количество в коробке
A nFlow дыхательные контуры		
4700000	nFlow дыхательный контур с проводом нагрева для CPAP для младенцев, длина ≥ 1,6м	12
4700001	nFlow дыхательный контур с проводом нагрева для CPAP для младенцев, длина ≥ 1,8м	10
4700016	nFlow дыхательный контур с проводом нагрева для CPAP для младенцев со съемной линией мониторинга, длина ≥ 1,8м	10
4708000	nFlow комплект шумопоглощения	50
4700011	nFlow Подвязки-ремешки для фиксации генератора на шапочке	60
B nFlow держатели-фиксаторы - шапочки		
	Размер	
4907009	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, темно-синий	10
4907008	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, бирюзовый	10
4907007	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, оранжевый	10
4907006	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, красный	10
4907005	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, зеленый	20
4907004	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, светло-оранжевый	20
4907003	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, синий	20
4907002	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, желтый	20
4907001	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, темно-серый	20
4907110	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, розовый	20
4907100	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, серый	20
4907000	Держатель-фиксатор для шлангов и трубок - шапочка, белый	20
C nFlow носовые маски		
	Размер	
4716000	nFlow носовые маски	30
4706000	nFlow носовые маски	30
4705000	nFlow носовые маски	30
4704000	nFlow носовые маски	30
D nFlow носовые канюли		
	Размер	
4703000	nFlow носовые канюли	30
4702000	nFlow носовые канюли	30
4701000	nFlow носовые канюли	30
4711000	nFlow носовые канюли	30

IS1.16 RU ▪ issue 9 10.24



ЗАО «Интерседжинал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904
Т: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Компания Intersurgical сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и MDSAP

Пожалуйста, подумайте перед тем, как печатать
Берегите энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот информационный листок, используйте двустороннюю печать, пожалуйста.