




STARMed CaStar R

Шлем для неинвазивной искусственной вентиляции легких (НИВЛ)

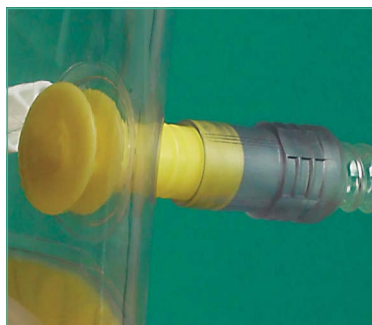

Реанимация ▪ Неинвазивная вентиляция ▪ **STARMed**



STARMed CaStar R шлем для НИВЛ

StarMed CaStar R

CaStar R - удобный и легкий интерфейс пациента для неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), разработан в качестве альтернативы традиционным методам проведения НИВЛ. CaStar R хорошо переносится длительное время и может снизить риски, связанные с эндотрахеальной интубацией и использованием лицевой маски. Его можно применять в положении на спине или полусидя, что обеспечивает идеальные условия для НИВЛ-терапии.

Технические характеристики

- 22М коннектор соответствует стандарту ISO
- Внутренний объем 11 литров - вес 380г
- Комфортные и атравматичные подмышечные держатели
- Встроенная надувная шейная манжета

- Два герметичных порта доступа для датчиков и катетеров 3.5-7.0 мм в диаметре
- Порт доступа к пациенту с накручивающейся крышкой. Он снабжен двунаправленным клапаном безопасности, который автоматически открывается в случае падения давления
- Герметичное уплотнение системы достигается за счет наличия эластичной мембраны в месте контакта с верхней частью тела, когда шлем находится в надутом состоянии

Библиография

- Mojoli F, et al. An optimized set-up for helmet noninvasive ventilation improves pressure support delivery and patient-ventilator interaction, Intensive Care Med. 2013 Jan;39(1):38-44
- Vargas F, et al. Helmet with specific settings versus facemask for noninvasive ventilation, Crit Care Med. 2009 Jun;37(6):1921-8
- Mojoli F, et al. Carbon dioxide rebreathing during non-invasive ventilation delivered by helmet: a bench study, Intensive Care Med. 2008 Aug;34(8):1454-60
- Antonelli M, et al. New treatment of acute hypoxemic respiratory failure: Noninvasive pressure support ventilation delivered by helmet - A pilot controlled trial, Crit Care Med. 2002 Mar;30(3):602-8

Клинические преимущества

Порт доступа к пациенту

С двунаправленным клапаном безопасности


Герметичные порты доступа

Для датчиков и катетеров

Прозрачный шлем

Для облегчения визуального мониторинга пациента

Комфортные подмышечные держатели

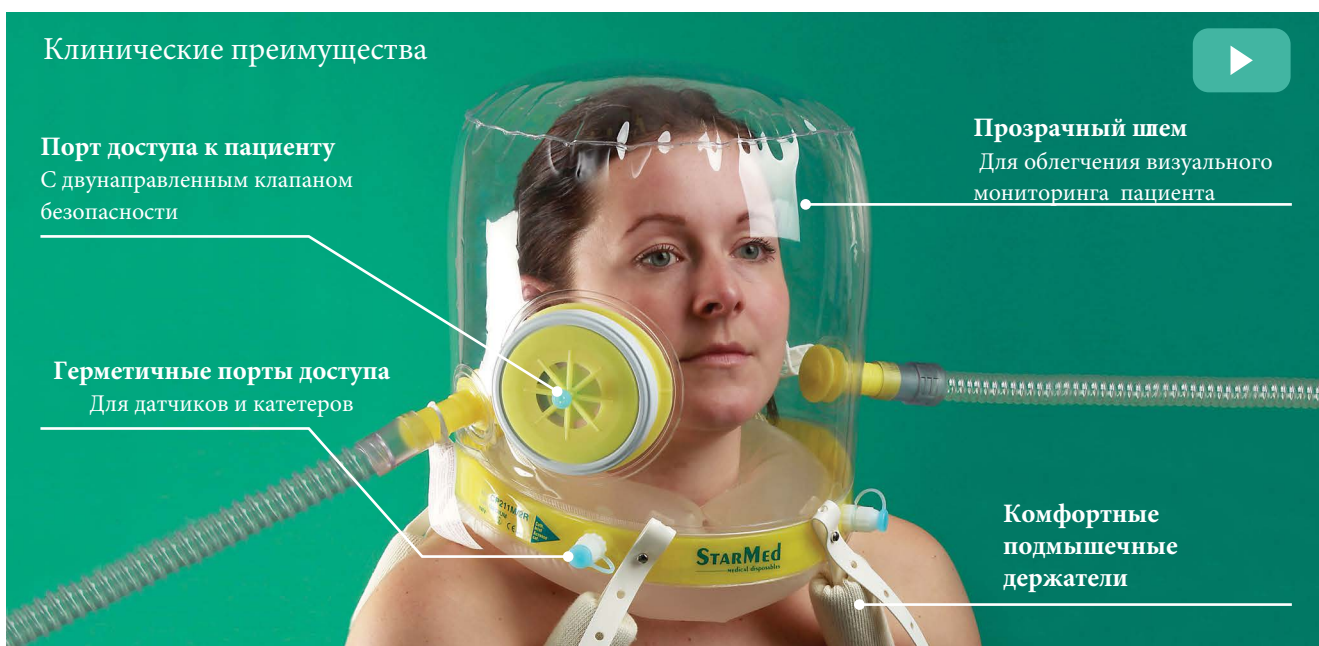

Шлем для НИВЛ CaStar R с раздувной шейной манжетой, двунаправленным клапаном безопасности и портом доступа к пациенту

Упаковки для клиентов поставляются по запросу

Код	Размер	Окружность шеи	Кол-во в коробке
CP211XXL/2RY	Экстра большой	≥50см	5
CP211XL/2RY	Очень большой	45-52см	5
CP211L/2RY	Большой	40-47см	5
CP211M/2RY	Средний	34-41см	5
CP211S/2RY	Малый	27-34см	5
CP211XS/2RY	Очень маленький	17-27см	5

📺 Видео доступно на www.intersurgical.com



www.intersurgical.com/info/starmed

IS1.18_ROW • Issue 5 03.16



ЗАО «Интерсерджиал» 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В, офис 904
Тел./факс: +7 (495) 771-6809 e-mail: info@intersurgical.ru, www.intersurgical.ru

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy
Netherlands ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia
Czech Republic ▪ Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan
Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Colombia ▪ Australia



Intersurgical Ltd is certified to ISO 14001, ISO 9001 and ISO 13485

Пожалуйста, задумайтесь перед тем, как напечатать
Берегите электроэнергию и бумагу. Если вам нужно напечатать это письмо, пожалуйста, используйте двустороннюю печать.